

KIT 4.2



V-Veil UP2



INSTRUCTIONS FOR USE OF "V-Veil UP2" KIT

INSTRUCTIONS D'UTILISATION DU KIT "V-VEIL UP2"

INSTRUȚIUNI UTILIZARE KIT "V-Veil UP2"

GERBRAUCHSANWEISUNGEN FÜR KIT „V-Veil UP2“

Please read and keep this leaflet

Veuillez lire cette notice et la conserver

The V-Veil UP2 Vaginal Collector Veil KIT is used to collect secretions, various fluids and substances...

ATTENTION! This KIT can be used during bleeding, pregnancy or following toxic shock syndrome...

- 1 "V-Veil UP2" Vaginal Collector Veil, which is a UVC disinfected, non-sterile, Class I medical device...

RECOMMENDATIONS AND ADVICE

- Wash your hands before using the device.
- Do not use if you have had sexual activity in the last 2 days.
- Do not use if you have washed the vaginal cavity more than 48 hours.

WHO IS PROHIBITED FROM USING THIS PRODUCT?

- Women who: have a fever or flu-like symptoms, even mild ones; have already suffered a toxic shock syndrome and do not have the recommendation from a medical specialist for taking the test.

IMPORTANT INFORMATION ON TOXIC SHOCK SYNDROME

Toxic Shock Syndrome (TSS) is a rare infection that can affect children, men and women (whether they are menstruating or not). It is caused by a toxin produced by a bacterium (Staphylococcus) that, commonly exists in the body. Half of the cases of TSS reported to date have occurred in adolescents and women during menstruation.

STORAGE:

Store in a clean, dry place away from heat sources.

INCIDENT REPORTING

ATTENTION! Only the instructions for use may be used as a reference for legal information, indications and restrictions.

INSTRUCCIONES DE USO DEL KIT "V-Veil UP2"

ISTRUZIONI PER L'USO DEL KIT "V-Veil UP2"

ISTRUCÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO KIT «V-Veil UP2»

تعليمات استخدام أداة "V-Veil UP2"

Vá rugam să citiți și să păstrați acest prospect

Kit-ul Voal Vaginal Colector „V-Veil UP2“ este folosit pentru a colecta secretii, diverse fluide și substanțe...

ATENȚIE! Acest KIT poate fi utilizat în timpul sângerărilor, al sarcinii sau în urma unui sindrom de șoc toxic doar în recomandarea unui specialist în domeniul medical.

CONTINUT:

- 1 Voile vaginal collector „V-Veil UP2“, care este un dispozitiv medical de clasă I, non-steril, dezinfectat par UVC
- 1 Instrucțiuni de utilizare
- 1 Receptiv pentru depozitarea și transportul probelor
- 1 Sac de siguranță UN3373
- 1 Pungă curțur

RECOMANDĂRI ȘI SFATURI:

- Laez-vous les mains avant d'utiliser ce KIT.
- Ne pas utiliser si vous avez eu une activité sexuelle au cours des 2 derniers jours.
- Ne pas utiliser si vous avez lavé la cavité vaginale plus récemment que 48 heures.

À QUI L'UTILISATION DE CE PRODUIT EST-ELLE INTERDITE ?

- Les personnes qui: ont de la fièvre ou des symptômes de type grippal même très léger; ont déjà souffert d'un syndrome de choc toxique et n'ont pas la recommandation d'un médecin spécialiste pour effectuer le test.

INFORMAȚII IMPORTANTE ȘI UN SIMPTOM DE ȘOC TOXIC

Sindromul de șoc toxic (SST) este o infecție rară care poate afecta copii, bărbații și femeile (indiferent dacă sunt sau nu la menstruație). Este cauzat de o toxină produsă de o bacterie (stafilococ) care există în mod obișnuit în corp. Jumătate din cazurile de SST înregistrate până în prezent au fost cauzate de această bacterie în timpul menstruației.

STOCKAGE:

Conserver dans un endroit propre et sec, loin des sources de chaleur.

SIGNALEMENT DES INCIDENTS

ATTENTION! Seul la documentation peut être utilisée comme référence pour les informations légales, indications et restrictions.

INSTRUCCIONES DE USO DEL KIT "V-Veil UP2"

ISTRUZIONI PER L'USO DEL KIT "V-Veil UP2"

ISTRUCÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO KIT «V-Veil UP2»

تعليمات استخدام أداة "V-Veil UP2"

Vá rugam să citiți și să păstrați acest prospect

Kit-ul Voal Vaginal Colector „V-Veil UP2“ este folosit pentru a colecta secretii, diverse fluide și substanțe...

ATENȚIE! Acest KIT poate fi utilizat în timpul sângerărilor, al sarcinii sau în urma unui sindrom de șoc toxic doar în recomandarea unui specialist în domeniul medical.

CONTINUT:

- 1 Voal Vaginal Colector „V-Veil UP2“, care este un dispozitiv medical dezinfectat UVC, nesteril, de clasă I
- 1 Instrucțiuni de utilizare
- 1 Receptiv pentru depozitarea și transportul probelor
- 1 Sac de siguranță UN3373
- 1 Pungă curțur

RECOMANDĂRI ȘI SFATURI:

- Spălați-vă pe mâini înainte de a utiliza acest kit.
- Nu utilizați dacă ați avut activitate sexuală în ultimele 2 zile.
- Nu utilizați dacă ați spălat cavitatea vaginală în ultimele 48 de ore.

QUI ESTE INTERZISĂ FOLOSIREA ACESTUI PRODUS?

- Pe febră sau simptome de tip gripal, chiar și în formă ușoară.
- suferit deja un sindrom de șoc toxic și nu au recomandarea unui specialist în domeniul medical pentru efectuarea testului.

INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND SIMPTOMUL DE ȘOC TOXIC

Sindromul de șoc toxic (SST) este o infecție rară care poate afecta copii, bărbații și femeile (indiferent dacă sunt sau nu la menstruație). Este cauzat de o toxină produsă de o bacterie (stafilococ) care există în mod obișnuit în corp. Jumătate din cazurile de SST înregistrate până în prezent au fost cauzate de această bacterie în timpul menstruației.

PÁSTRARE:

Se păstra într-un loc curat și uscat, departe de surse de căldură.

RAPORTEAREA INCIDENTELOR

ATENȚIE! Numai instrucțiile de utilizare pot fi folosite ca referință pentru informațiile legale, indicații și restricții.

INSTRUCCIONES DE USO DEL KIT "V-Veil UP2"

ISTRUZIONI PER L'USO DEL KIT "V-Veil UP2"

ISTRUCÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO KIT «V-Veil UP2»

تعليمات استخدام أداة "V-Veil UP2"

Vá rugam să citiți și să păstrați acest prospect

Kit-ul Voal Vaginal Colector „V-Veil UP2“ este folosit pentru a colecta secretii, diverse fluide și substanțe...

ATENȚIE! Acest KIT poate fi utilizat în timpul sângerărilor, al sarcinii sau în urma unui sindrom de șoc toxic doar în recomandarea unui specialist în domeniul medical.

CONTINUT:

- 1 Voal Vaginal Colector „V-Veil UP2“, care este un dispozitiv medical dezinfectat UVC, nesteril, de clasă I
- 1 Instrucțiuni de utilizare
- 1 Receptiv pentru depozitarea și transportul probelor
- 1 Sac de siguranță UN3373
- 1 Pungă curțur

RECOMANDĂRI ȘI SFATURI:

- Spălați-vă pe mâini înainte de a utiliza acest kit.
- Nu utilizați dacă ați avut activitate sexuală în ultimele 2 zile.
- Nu utilizați dacă ați spălat cavitatea vaginală în ultimele 48 de ore.

QUI ESTE INTERZISĂ FOLOSIREA ACESTUI PRODUS?

- Pe febră sau simptome de tip gripal, chiar și în formă ușoară.
- suferit deja un sindrom de șoc toxic și nu au recomandarea unui specialist în domeniul medical pentru efectuarea testului.

INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND SIMPTOMUL DE ȘOC TOXIC

Sindromul de șoc toxic (SST) este o infecție rară care poate afecta copii, bărbații și femeile (indiferent dacă sunt sau nu la menstruație). Este cauzat de o toxină produsă de o bacterie (stafilococ) care există în mod obișnuit în corp. Jumătate din cazurile de SST înregistrate până în prezent au fost cauzate de această bacterie în timpul menstruației.

PÁSTRARE:

Se păstra într-un loc curat și uscat, departe de surse de căldură.

REPORTAREA INCIDENTELOR

ATENȚIE! Numai instrucțiile de utilizare pot fi folosite ca referință pentru informațiile legale, indicații și restricții.

INSTRUCCIONES DE USO DEL KIT "V-Veil UP2"

ISTRUZIONI PER L'USO DEL KIT "V-Veil UP2"

ISTRUCÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO KIT «V-Veil UP2»

تعليمات استخدام أداة "V-Veil UP2"

Vá rugam să citiți și să păstrați acest prospect

Kit-ul Voal Vaginal Colector „V-Veil UP2“ este folosit pentru a colecta secretii, diverse fluide și substanțe...

ATENȚIE! Acest KIT poate fi utilizat în timpul sângerărilor, al sarcinii sau în urma unui sindrom de șoc toxic doar în recomandarea unui specialist în domeniul medical.

CONTINUT:

- 1 Voal Vaginal Colector „V-Veil UP2“, care este un dispozitiv medical de clasă I, non-steril, dezinfectat par UVC și este steril
- 1 Instrucțiuni de uso
- 1 Contenedor para el almacenamiento y el transporte de las muestras
- 1 Bolsa de seguridad UN3373
- 1 Bolsa de envío

RECOMENDACIONES Y CONSEJOS:

- Lávese las manos antes de utilizar este KIT.
- No utilices si has tenido actividad sexual en los últimos 2 días.
- No utilices si te has lavado la cavidad vaginal hace menos de 48 horas.
- Si estás embarazada o tienes sangre en la cavidad vaginal, utilizar este dispositivo médico solamente por recomendación de tu médico.

QUIÉN EL ESTE INTERDITO PARA USAR ESTE PRODUCTO LE ESTÁ PROHIBIDO?

- Quienes tienen: fiebre o síntomas parecidos a los de la gripe, aunque sean leves.
- han sufrido ya un síndrome de shock tóxico y no cuentan con la recomendación de un profesional médico para hacerse la prueba.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL SÍNDROME DE SHOCK TÓXICO

El síndrome de shock tóxico (SST) es una infección poco frecuente que puede afectar a niños, hombres y mujeres (que tengan o no la regla). Está causado por una toxina producida por una bacteria (estafilococo) que existe habitualmente en el organismo.

ALMACENAMIENTO:

Almacenar en un lugar limpio, seco y alejado de fuentes de calor.

NOTIFICACION DE INCIDENTES

ATENCIÓN! Solo las instrucciones de uso pueden utilizarse como referencia para la información legal, las indicaciones y las restricciones.

INSTRUCCIONES DE USO DEL KIT "V-Veil UP2"

ISTRUZIONI PER L'USO DEL KIT "V-Veil UP2"

ISTRUCÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO KIT «V-Veil UP2»

تعليمات استخدام أداة "V-Veil UP2"

Vá rugam să citiți și să păstrați acest prospect

Kit-ul Voal Vaginal Colector „V-Veil UP2“ este folosit pentru a colecta secretii, diverse fluide și substanțe...

ATENȚIE! Acest KIT poate fi utilizat în timpul sângerărilor, al sarcinii sau în urma unui sindrom de șoc toxic doar în recomandarea unui specialist în domeniul medical.

CONTINUT:

- 1 Voile vaginal collector „V-Veil UP2“, care este un dispozitiv medical de clasă I, non-steril, dezinfectat par UVC, non-steril, de clasă I
- 1 Instrucțiuni for uso
- 1 Contenedor para lo almacenamiento y el trasporo de los campioin.
- 1 Bosta de seguridad UN3373
- 1 Bosta de envío

RECOMENDACIONES Y CONSEJOS:

- Lávese las manos antes de utilizar este KIT.
- No utilices si te has tenido actividad sexual en los últimos 2 días.
- No utilices si te ha lavado la cavidad vaginal hace menos de 48 horas.
- Si estás embarazada o tienes sangre en la cavidad vaginal, utilizar este dispositivo médico solamente por recomendación de tu médico.

QUIÉN EL VIETADO QUESTO PRODOTTO?

- Alte donne che: hanno febbre o sintomi dell'influenza, anche lievi.
- hanno già subito una sindrome da shock tossico e non hanno la raccomandazione di uno specialista nel settore medico a fare il test.

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SINDROME DA SHOCK TOSSICO


La sindrome da shock tossico (SST) è un'infezione rara che può colpire bambini, uomini e donne (indipendentemente dal fatto se hanno o no le mestruazioni). È causata da una tossina prodotta da un batterio (stafilococco) che è comunemente presente nel corpo umano.

CONSERVAZIONE:

Conservare in un luogo pulito e asciutto, lontano da fonti di calore.

SEGNALAZIONE DEGLI INCIDENTI

ATTENZIONE! Solo le istruzioni per l'uso possono essere utilizzate come riferimento per informazioni legali, indicazioni e restrizioni.

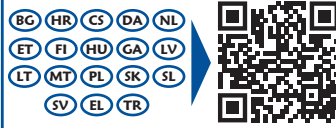

V-Veil-UP PRODUCTION SRL
Fonellor Ion Angelescu 24A
Pitești 110354 ARGE ROMANIA
client@vvup.org
TEL: 0040 348 420 620

