


V-Veil UP2™ KIT 1.3

V-Veil UP2™ & UP2 Retrofitter™ أنبوب

يرجى القراءة والاحتفاظ بهذا المنشور

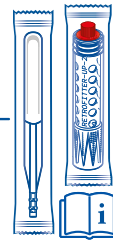

شاهد الفيديو باللغة الإنجليزية
الخاص بطريقة استخدام الجهاز
المضمن في العدة

ما هو ومتى يجب استخدام V-Veil UP2 1.3™؟

V-Veil UP2 1.3™ عبارة عن حزمة إجراءات أخذ العينات الذاتية تستخدم لجمع الإفرازات والسوائل والمواد المختلفة الموجودة في جوف المهبل وعنق الرحم من أجل تشخيصها عن طريق اختبارات معملية.

انتباه!

يمكن استخدام هذه العدة أثناء النزيف أو الحمل أو بعد متلازمة الصدمة التسممية فقط بناء على توصية أخصائي في المجال الطبي.

المحتويات:

- 1 حجاب مهبلي جامع V-Veil UP2™ الذي عبارة عن جهاز طبي تم تطويره باستخدام UVC، غير معقم ومن الدرجة الأولى
- 1 تعليمات استخدام
- عدد (1) أنبوب UP2 Retrofitter

سوف تحتاج إلى كرونومتر الذي غير مدرج في العدة.

توصيلت ونسائح:

- قومي بغسيل يديك قبل استخدام هذه العدة.
- يرجى عدم استخدام في حالة ممارسة الجنس خلال اليومين الآخرين.
- يرجى عدم الاستخدام في حالة غسيل التجويف المهبلي خلال فترة أقل من 48 ساعة.
- يجب تجنب العلاجات المهبلية الأخرى (تحاميل، جل، كريمات، موانع الحمل، معقمات، مواد تشحيم) أو الإجراءات المهبلية الأخرى (فرشة) عنق الرحم، سدادات قطنية مهبلية، مناديل مهبلية، فحص مهبلي) قبل 48 ساعة.
- إذا كنت حاملاً أو في حالة وجود دم في التجويف المهبلي، يرجى استخدام هذا الجهاز الطبي فقط بناء على توصية الطبيب الخاص بك
- ساعة من أخذ العينة الذاتية.
- لا يمكن ولا ينبغي أن يبقى الحجاب داخل المهبل لأكثر من 30 دقيقة، لكن إذا نسيت إزالته قومي بإزالته بمجرد أن تتذكرين.
- قومي باستخدام فقط حجاب واحد في وقت واحد.
- لا ينبغي إعادة استخدام الحجاب حتى وإن لو يكن مشرباً.
- لمزيد من التوصيات، يرجى التحدث مع الطبيب، طبيب أمراض النساء أو الصيدلي الخاص بك.

لمن يُمنع استخدام هذا المنتج؟ للنساء اللاتي:

- لديهن حمى أو أعراض تشبه أعراض إنفلونزا، حتى لو هي خفيفة.
- أصيبت فعلاً بمتلازمة الصدمة التسممية وليست لديهن توصية أخصائي الرعاية الصحية لإجراء الفحص.
- لديهن حساسية من المواد البلاستيكية ومشتقاتها.
- عمرهن أقل من 18 سنة، دون اتفاق الوالدين و/أو أخصائي الرعاية الصحية.
- لم يقرأن ورقة التعليمات عمداً.
- لديهم نزيف وليست لديهن توصية أخصائي الرعاية الصحية لإجراء الفحص.
- الحوامل وليست لديهن توصية أخصائي الرعاية الصحية لإجراء الفحص.

معلومات هامة بشأن متلازمة الصدمة التسممية

متلازمة الصدمة التسممية هي عدوى نادرة ولكنها قد تكون خطيرة جداً. يمكن أن تصيب الأطفال، الرجال والنساء (سواء أثناء فترة الحيض أم لا). تسبب مادة سامة من بكتيريا (عقودية) موجودة في الجسم بشكل عادي. نصف حالات متلازمة الصدمة التسممية المسجلة حتى تاريخه خاصة بالمراهقات والنساء أثناء فترة الحيض. ارتبطت المتلازمة باستخدام السدادات القطنية، لكن يمكن أن تحدث أيضاً عند استخدام مواد الحماية الأخرى (فوط صحية، فوط صحية يومية ...). متلازمة الصدمة التسممية هي عدوى قد تكون قاتلة ولذلك يجب اكتشافها مبكراً وعلاجها فوراً. يمكن أن تظهر أعراض متلازمة الصدمة التسممية فجأة أثناء الحيض أو بعد فترة قصيرة.

وقد لا تكون جميع الأعراض موجودة وقد لا تظهر في نفس الوقت: حمى مفاجئة (أكثر من 39 درجة مئوية، فيء، إسهال، التهاب في الحلق، دوار، إغماء، ألم العضلات، طفح جلدي يشبه حروق الشمس (قد يتقشر الجلد بعد عدة أيام). إذا كنت تعانين من هذه الأعراض يجب إزالة V-Veil UP2™ بشكل فوري واستشارة الطبيب الشخصي أو أقرب طبيب مع ذكره أنك أثناء فترة الحيض. وقد تظهر متلازمة الصدمة التسممية مع أو بدون استخدام V-Veil UP2™. إذا كنت قد أصبت بمتلازمة الصدمة التسممية يرجى استشارة طبيبك قبل إعادة استخدام V-Veil UP2™. بموجب الاستخدام الصحيح لـ V-Veil UP2™ واتباع التوصيات الواردة في هذه ورقة التعليمات سيقلل من خطر الإصابة بمتلازمة الصدمة التسممية.

الحفظ:

يُحفظ في مكان نظيف وجاف، بعيداً عن مصادر الحرارة.

الإبلاغ عن الحوادث: انتباه!

يمكن استخدام التعليمات الاستخدام فقط كمرجع للمعلومات القانونية والإشارات والقواعد.

رجاء عدم استخدام المنتج في حالة تلف عبوة أو انتهاء موعد الصلاحية. على الرغم من الإجراءات التي تتخذها أثناء عملية التصنيع، إذا كنت تعتقد أنك استلمت منتجاً معيباً، يرجى عدم استخدامه والتواصل مع المصنع أو الموزع. مع ذكر المشكلة التي واجهتها بكل وضوح وكذلك رقم تشخيص المذکور في العبوة. يمكنك الإبلاغ عن الحوادث المتعلقة بالجهاز على عنوان البريد الإلكتروني للمصنع client@vvup.org وإلى السلطة المختصة في دولة العضو المتواجد فيها.

MD	جهاز طبي
CE	المطابقة الأوروبية
WARRANTY	غير معقم
⚠	رجاء عدم الاستخدام حالة تلف عبوة
☂	الحفاظ على الجاف
☀	الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة
⛔	إعادة الاستخدام
⚠	انتباه
📖	يرجى قراءة التعليمات
IVD	اختبار تشخيصي في المختبر
🧴	يرجى التخلص من القمامة في سلة المهملات
🚫	إتري في الأمراض

EN	FR	RO	DE	ES
IT	PT	BG	HR	CS
DA	NL	EL	FI	HU
GA	LV	LT	MT	PL
SK	SL	SV	EL	TR



الموزع المعتمد: أنظر على المعلومات الموجودة على العبوة.

جاري الحصول على براءات الاختراع - حجاب مهبلي جامع V-Veil UP2™


V-VEIL-UP PRODUCTION SRL
Clăcoanesti 280B Calinesti
117197 Arges ROMANIA
client@vvup.org
TEL : 0040 348 620 620

1

تعليمات الاستخدام الخطوة


1

متلازمة الصدمة التسممية هي عدوى نادرة ولكنها قد تكون خطيرة جداً. يمكنه تصيب الأطفال، الرجال والنساء (سواء أثناء فترة الحيض أم لا). تسببها مادة سامة وإلى السلطة المختصة في دولة العضو المتواجد فيها.

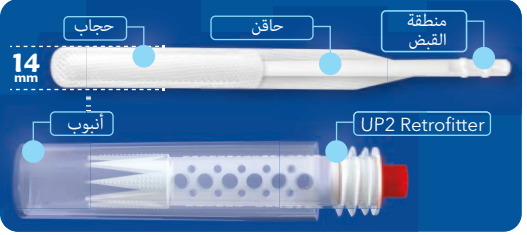

2

قومي بفتح العلبة وإزالة **TMV-Veil UP2** من عبوته بموجب فتحة من الجزء الخاص بذلك. احتفظي بالعلبة وقومي بالتخلص من العبوة المفتوحة مع النفايات المنزلية العادية.

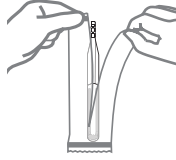


2

تعليمات الاستخدام الخطوة


6

لإزالة الحجاب **TMV-Veil UP2** قومي بغسيل وتنشيف يديك باستخدام قطعة قماش نظيفة. افتحي غطاء الأنبوب **UP2 Retrofitter** وأمسكيه بيدك. ضعي الأنبوب على سطح مستو ونظيف.

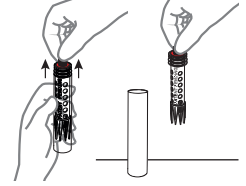


3

قومي بمسك الحاقن بأصابعك في الجزء النهائي (في مساحة القبض). استرخي واختري الوضع الذي تراه الأكثر راحة - الجلوس مع إبعاد رجليك عن بعضهما، الوقوف مع رفع أحد ساقك أو الوقوف مع ثني ساقك قليلاً. قومي بفتح الشفاران الخارجيين وبإحضار الجزء العلوي للـ **TMV-Veil UP2** على مقربة المهبل. ادخلي الحجاب ببطء باستخدام الحاقن. استمري في ضغط الحجاب ببطء باستخدام الحاقن لغاية بقاء مساحة القبض خارج المهبل. الجزء النهائي على شكل حرف "V" يجب أن يتدلى بحرية خارج المهبل.

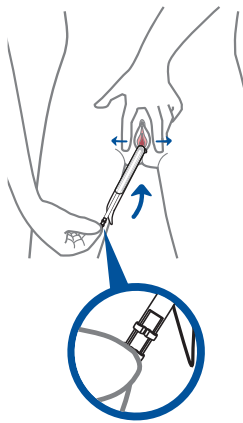


7

سترخي واختري الوضع الذي تراه الأكثر راحة من الأوضاع الموصوفة أعلاه. تتم إزالة الحجاب ببطء بموجب سحب الجزء النهائي على شكل حرف "V".

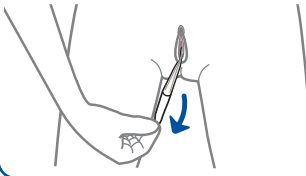


8

ضعي العينة داخل الأنبوب.

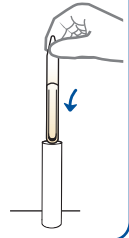


9

اضغطي لإغلاق غطاء الـ **UP2 Retrofitter** حتى تسمعي "نقرة" 3 مرات، مع الاحتفاظ بالعلبة بين جدران الـ **UP2 Retrofitter** والأنبوب.

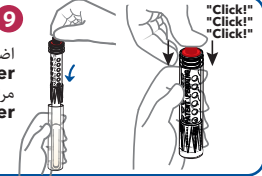

4

لإزالة الحاقن قومي بسحبه للخارج ببطء مع الحرص على عدم إزالة الحجاب. قومي بالتخلص من الحاقن مع النفايات المنزلية العادية.

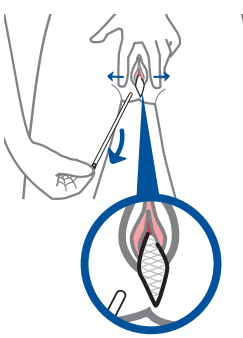

انتباه !

نظراً لحجم المهبل وطريقة إدخال الحجاب داخله، من الضروري أن يبقى الجزء على شكل حرف "V" مرئياً، حتى يمكن إزالته بعد الاستخدام.

قومي بتخزين الحاوية مع العينة المجمعة في مكان نظيف وجاف، محمي من أشعة الشمس. اتبعي الخطوات التي أوصى بها طبيبك أو الصيدلي أو الشخص المختص الذي أوصى لك بأخذ العينات الذاتية.



5

يجب الانتظار 2 دقيقة بعد إدخال الحجاب في التجويف المهبل دون إزالته.

