


V-Veil UP2™ KIT 1.3

V-Veil UP2™ i UP2 Retrofitter™ eppruvete

Pročitajte i sačuvajte ove upute

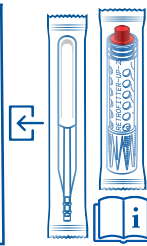

Pogledajte video na engleskom jeziku s uputama kako koristiti Uređaj u KOMPLETU

ŠTO JE V-Veil UP2™ I KADA SE MOŽE UPOTRIJEBITI?

V-Veil UP2™ KIT 1.3 je paket za postupke samouzorkovanja koji se koristi za prikupljanje sekreta, raznih tekućina i tvari koje se nalaze u vaginalnoj šupljini i grliću maternice za dijagnozu laboratorijskim testovima.

PAŽNJA! Ovaj komplet smije se upotrebljavati tijekom krvarenja, trudnoće ili nakon sindroma toksičnog šoka samo na preporuku medicinskog stručnjaka.

Sadržaj:

- 1 vaginalni komplet s absorbentom za prikupljanje **V-Veil UP2™**, dezinficiran UVC zračenjem, nesterilni medicinski uređaj Klase 1
 - 1 Upute za uporabu
 - 1 UP2 Retrofitter eppravete
- Potrebna je štoperica koja nije dio ovog kompleta.

PREPORUKE I SAVJETI:

- Prije uporabe ovog kompleta operite ruke.
- Komplet nemojte upotrebljavati ako ste imali spolne aktivnosti u posljednja 2 dana.
- Ne upotrebljavajte ovaj komplet ako ste izvršili ispiranje vaginalne šupljine unatrag 48 sati
- Druge intravaginalne tretmante (ovule, gelove, kreme, kontracepciju, dezinficijense, lubrikante) ili druge intravaginalne postupke (brisoze, intravaginalne tampone, intravaginalne maramice, vaginalne preglede) potrebno je izbjegavati 48 sati prije samostalnog uzimanja uzorka.
- Ako ste trudni ili imate krvi u vaginalnoj šupljini ovaj medicinski uređaj upotrijebite samo po savjetu liječnika.
- Absorbent ne smije ostati u vagini dulje od 30 minuta. Ako ste ga zaboravili ukloniti učinite to čim se sjetite.
- U isto vrijeme upotrebljavajte samo jedan absorbent.
- Absorbent se ne smije ponovo upotrebljavati, čak i ako nije impregniran.
- Za više preporuka razgovarajte sa svojim liječnikom, ginekologom ili ljekarnikom.

TKO NE SMIJE UPOTREBLJAVATI OVAJ PROIZVOD?

Zene koje:

- imaju temperaturu ili simptome nalik gripi, čak i one blage
- su već preboljele sindrom toksičnog šoka i nemaju preporuku specijaliste za testiranje
- su alergične na plastiku i njezine derivate
- su mlađe od 18 godina i nemaju pristanak roditelja i/ili liječnika
- upute nisu pročitane namjerno.
- krvare ili nemaju preporuku medicinskog stručnjaka za izvršavanje testiranja
- su trudne i nemaju preporuku medicinskog stručnjaka za izvršavanje testa.

VAŽNE INFORMACIJE O SINDROMU TOKSIČNOG ŠOKA:

Sindrom toksičnog šoka (Toxic Shock Syndrome – TSS) je rijetka infekcija koja može pogoditi djecu, muškarce i žene (s menstrualnim ciklusom ili ne). Uzrokuje ga toksin koji proizvodi bakterija (stafilokok) koja uobičajeno postoji u tijelu. Polovica do sada zabilježenih slučajeva sindroma toksičnog šoka (TSS) dogodila se u adolescenata i žena tijekom menstruacije. Sindrom je povezan s uporabom tampona, ali se može dogoditi i pri uporabi drugih sredstava zaštite (ulošci, dnevni ulošci...). Sindrom toksičnog šoka (TSS) je potencijalno fatalna infekcija koja se mora vrlo rano otkriti i odmah liječiti. Simptomi sindroma toksičnog šoka (TSS) se mogu naglo pojaviti tijekom menstrualnog ciklusa ili kratko nakon njega. Svi simptomi ne moraju biti prisutni i ne moraju se dogoditi u isto vrijeme: nagla vrućica (> 39 °C), povraćanje, proljev, grlobolja, vrtoglavica, nesvjestica, bolovi u mišićima, osip nalik opeklinama sunca (nekoliko dana kasnije ljuštenje kože). Ako osjetite ove simptome odmah uklonite absorbent i savjetujte se sa svojim obiteljskim liječnikom ili najbližim liječnikom. Do sindroma toksičnog šoka (TSS) može doći s ili bez uporabe kompleta **V-Veil UP2™**. Ako već imate sindrom toksičnog šoka (TSS) razgovarajte sa svojim liječnikom prije uporabe kompleta **V-Veil UP2™**. Ispravnom uporabom kompleta **V-Veil UP2™** te ako se pridržavate preporuka smanjit ćete rizik od razvoja sindroma toksičnog šoka (TSS).

SKLADIŠTENJE:

Skladištite na čistom i suhom mjestu dalje od izvora topline.

IZVJEŠĆE O INCIDENTU:

PAŽNJA! Samo se upute za uporabu mogu upotrebljavati kao referenca za pravne informacije, indikacije i ograničenja. Nemojte upotrebljavati proizvod ako je pakiranje oštećeno i ako je prošao rok valjanosti. Ako, unatoč poduzetim mjerama smatrate da ste dobili oštećen proizvod nemojte ga upotrebljavati te se obratite proizvođaču ili zastupniku s jasnim opisom problema i brojem serije koji je naveden na pakiranju. Incidenti koji su povezani s uređajem mogu se prijaviti proizvođaču na adresu e-pošte client@vvup.org i nadležnom tijelu države članicu u kojoj se nalazite. Komplet **V-Veil UP2™** KIT proizvodi se u skladu s primjenjivim odredbama i zahtjevima Europske unije.

MD	Medicinski uređaj
CE	Europska usklađenost
	Nesterilno
	Ne upotrebljavajte ako je pakiranje oštećeno
	Držite na suhom
	Držite dalje od direktne sunčeve svjetlosti
	Nemojte ponovo upotrebljavati
	Pažnja
	Pročitajte obavijest
IVD	Dijagnostika in vitro
	Otpad bacite u kantu za otpad
	Ne bacajte u WC školjku



Ovlašteni zastupnik:
pogledajte informacije na pakiranju.

Patent u postupku – vaginalni komplet za prikupljanje s absorbentom **V-Veil UP2™**


V-VEIL-UP PRODUCTION SRL

Clocanesti 280B Calinesti
117197 Arges ROMANIA
client@vvup.org
TEL : 0040 348 420 620

UPUTE ZA UPOTREBU KORAK

1


- 1** Operite ruke i obrišite ih čistim ručnikom.

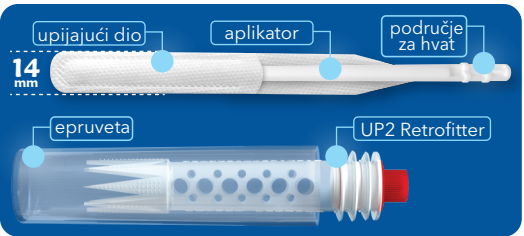

UPUTE ZA UPOTREBU KORAK


2

- 2** Otvorite kutiju i uklonite komplet **V-Veil UP2™** iz pakiranja otvaranjem na predviđenom mjestu. Zadržite kutiju i bacite otvoreno pakiranje u uobičajeni kućni otpad.

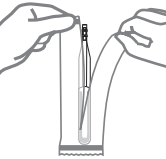


- 6** Za uklanjanje kompleta **V-Veil UP2™** operite ruke i obrišite ih čistim ručnikom.

Otvorite **UP2 Retrofitter™** čep epruvete i držite ga u ruci. Stavite epruvetu na ravnu, čistu površinu.

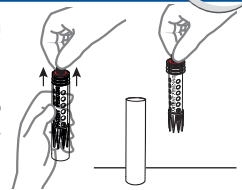


- 3** Prstima uhvatite aplikator na njegovom kraju (na dijelu za držanje). Opustite se i odaberite položaj koji vam je najudobniji: sjedeći s raširenim nogama, stojeći s jednom nogom podignutom ili stojeći s jednom nogom blago savijenom.


Uklonite vanjske usne stidnice i prinesite gornji dio kompleta **V-Veil UP2™** u blizinu rodnice. Pažljivo umetnite absorbent pomoću aplikatora. Nastavite pažljivo gurati absorbent s aplikatorom sve dok dio za držanje ne bude izvan vagine. Krajnji dio u obliku slova V trebao bi opušteno visjeti izvan vagine.

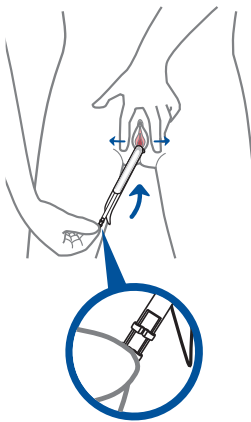


- 7** Opustite se i odaberite jedan najudobniji položaj gore navedenih. Absorbent se može na jednostavan način ukloniti povlačenjem krajnjeg dijela u obliku slova V.

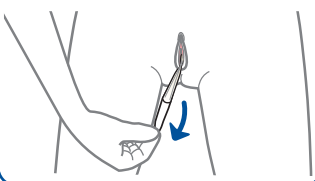

- 8** Stavite uzorak u epruvetu.

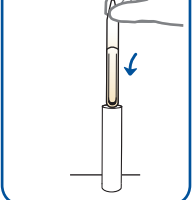


- 9** Pritisnite za zatvaranje **UP2 Retrofitter™** čepa dok ne čujete „klik“ 3 puta, zadržavajući uzorak između stijenki proizvoda Retrofitter i epruvete.

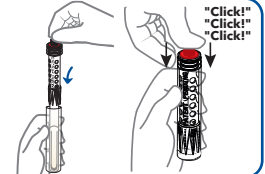


- 4** Krajnji dio u obliku slova V trebao bi opušteno visjeti izvan vagine. Aplikator bacite u uobičajeni kućni otpad.

PAŽNJA! Ovisno o veličini vaše vagine i način na koji ste unijeli intravaginalnu membranu važno je da je krajnji dio u obliku slova V bude vidljiv tako da se nakon upotrebe može ukloniti.

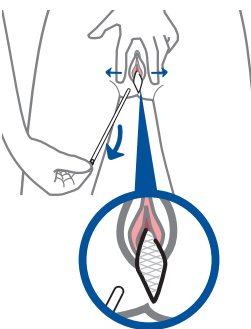

- 5** Nakon umetanja absorbenta u vaginu sačekajte 2 minute.

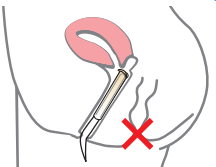

- 10** Spremnik s prikupljenim uzorkom čuvajte na čistom i suhom mjestu, zaštićenom od sunčeve svjetlosti. Slijedite korake koje je preporučio vaš liječnik, ljekarnik ili stručnjak koji vam je preporučio samouzorkovanje.

