


V-Veil UP2™ KIT 1.3

V-Veil UP2™ & tubo UP2 Retrofitter™

Por favor, leia e guarde este folheto

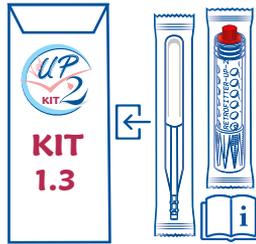

Veja o vídeo em inglês sobre como utilizar o dispositivo incluído no KIT

O QUE É E QUANDO PODE SER UTILIZADO O V-Veil UP2™ KIT 1.3?

O **V-Veil UP2™ KIT 1.3** é um pacote de procedimentos de auto-coleta de amostras utilizado para recolher secreções, vários fluidos e substâncias, que se encontram na cavidade vaginal e no colo do útero para o diagnóstico por testes laboratoriais.

ATENÇÃO! Este KIT só pode ser utilizado durante uma hemorragia, uma gravidez ou na sequência de um síndrome de choque tóxico por recomendação de um profissional de saúde.

Conteúdo:

- 1 Vêu Coletor Vaginal **V-Veil UP2™**, que é um dispositivo médico de classe I, não estéril, desinfetado por UVC
- 1 Instruções de utilização
- 1 tubo 1 UP2 Retrofitter

É necessário um cronómetro, que não está incluído no kit.

RECOMENDAÇÕES E CONSELHOS:

- Lava as mãos antes de utilizares este KIT.
- Não uses se tiveres tido atividade sexual nos últimos 2 dias.
- Não utilises se tiveres lavado a cavidade vaginal há mais de 48 horas.
- Recomenda-se evitar qualquer outro tratamento intravaginal (óvulos, geles, cremes, contracetivos, desinfetantes, lubrificantes) ou qualquer outro procedimento intravaginal (cotonete, tampões intravaginais, toalhitas intravaginais, exame vaginal) nas 48 horas anteriores à auto-coleita.
- Se estiveres grávida ou tiveres sangue na cavidade vaginal, utiliza este dispositivo médico apenas com o conselho do teu médico.
- O vêu não deve permanecer na vagina durante mais de 30 minutos, mas se te esqueceres de o tirar, tira-o assim que te lembrares.
- Utiliza apenas um vêu de cada vez.
- O vêu não deve ser reutilizado, mesmo que não

QUEM ESTÁ PROIBIDO DE UTILIZAR ESTE PRODUTO? As mulheres:

- que tenham febre ou sintomas semelhantes aos da gripe, mesmo que ligeiros.
- que já sofreram uma síndrome de choque tóxico e não têm a recomendação de um médico especialista para fazer o teste.
- que são alérgicas a plásticos e seus derivados.
- com menos de 18 anos de idade, sem o consentimento dos pais e/ou do médico.
- que deliberadamente não leram a folha de instruções.
- que tenham hemorragias e não tenham uma recomendação de um profissional médico para fazer o teste.
- grávidas e que não tenham uma recomendação de um profissional de saúde para fazer o teste.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A SÍNDROME DO

CHOQUE TÓXICO: A Síndrome do Choque Tóxico (SCT) é uma infeção rara que pode afetar crianças, homens e mulheres (quer estejam menstruadas ou não). É causada por uma toxina produzida por uma bactéria (estafilococo) que existe habitualmente no organismo. Metade dos casos de SCT registados até à data ocorreram em adolescentes e mulheres durante a menstruação. A síndrome tem sido associada à utilização de tampões, mas também pode ocorrer quando são utilizados outros meios de proteção (compressas, pensos higiénicos...). A SCT é uma infeção potencialmente fatal e, por esta razão, deve ser detectada muito cedo e tratada imediatamente. Os sintomas da SST podem aparecer subitamente, durante a menstruação ou pouco depois. Podem não estar todos presentes e podem não ocorrer ao mesmo tempo: febre súbita (>39C), vômitos, diarreia, dores de garganta, tonturas, desmaios, dores musculares, erupção cutânea tipo queimadura solar (a pele pode descamar alguns dias depois). Se sentires estes sintomas, debes retirar imediatamente o vêu e consultar o teu médico ou o médico mais próximo. O SCT pode ocorrer com ou sem a utilização do **V-Veil UP2™**. Se já tiveres desenvolvido uma SST, fala com o teu médico antes de utilizares **V-Veil UP2™**. Se utilizares o **V-Veil UP2™** corretamente e se gures as recomendações, reduzirás o risco de desenvolver a síndrome do choque tóxico.

ARMAZENAMENTO:

Conservar num local limpo e seco, afastado de fontes de calor.

COMUNICAÇÃO DE INCIDENTES:

ATENÇÃO! Apenas as instruções de utilização podem ser utilizadas como referência para informações legais, indicações e restrições. Não utilizar o produto se a embalagem estiver danificada e se o prazo de validade tiver expirado. Se, apesar das medidas que tomamos no processo de fabrico, considerares que recebeste um produto defeituoso, não o utilizes e contacta o fabricante ou o distribuidor, indicando claramente o problema e o número de lote indicado na embalagem. Os incidentes relacionados com o dispositivo podem ser comunicados ao fabricante em client@vvup.org e à autoridade competente do Estado-Membro onde te encontras. O KIT **V-Veil UP2™** é produzido em conformidade com as disposições e requisitos aplicáveis da União Europeia.

	Dispositivo médico
	Conformidade europeia
	Não estéril
	Não utilizar se a embalagem estiver danificada
	Manter seco
	Manter afastado da luz solar direta
	Não reutilizar
	Atenção
	Ler o aviso
	Diagnóstico In-Vitro
	Deitar o lixo para um caixote do lixo
	Não deitar na sanita



Distribuidor autorizado: ver informações sobre a embalagem.

Patentes pendentes - Vêu Vaginal Coletor **V-Veil UP2™**


V-VEIL-UP PRODUCTION SRL

Clocanesti 280B Calinesti
117197 Arges ROMANIA
client@vvup.org
TEL : 0040 348 420 620

INSTRUÇÕES DE USO PASSO

1

- 1** Lava as mãos e limpa-as com uma toalha limpa.

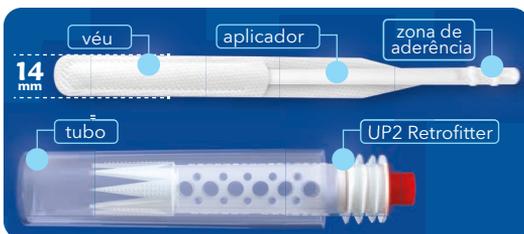

- 2** Abre a caixa e retira o **V-Veil UP2™** da sua embalagem, abrindo-a pelo lado dedicado. Guarda a caixa e deita fora a embalagem aberta juntamente com o lixo doméstico normal.




INSTRUÇÕES DE USO PASSO

2

- 6** Para remover o **V-Veil UP2™**, lava as mãos e limpa-as com uma toalha limpa.


Abra a tampa do **UP2 Retrofitter™** do tubo e segure-o na sua mão. Coloque o tubo numa superfície plana e limpa.

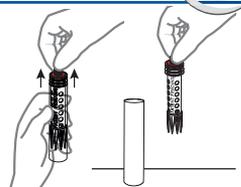


- 3** Agarra o aplicador pela extremidade (na zona da pega) com os dedos. Relaxa e escolhe a posição mais confortável para ti: sentada com as pernas afastadas, de pé com uma perna levantada ou de pé com as pernas ligeiramente dobradas.

Retira os lábios exteriores e aproxima a parte superior do **V-Veil UP2™** da vagina. Insete suavemente o véu com o aplicador.

Continua a empurrar suavemente o véu com o aplicador até que a área de fixação fique fora da vagina. A extremidade em forma de V deve ficar solta fora da vagina.

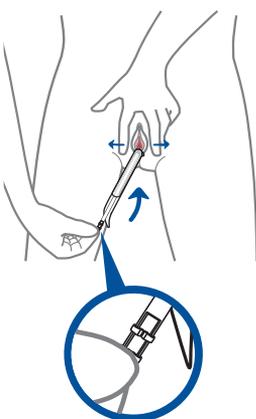


- 7** Relaxa e escolhe a posição que te parece mais confortável de entre as apresentadas acima. O véu pode ser facilmente removido, puxando a extremidade em forma de V.

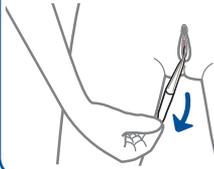


- 8** Coloque a amostra no interior do tubo.



- 9** Pressione para fechar a tampa do **UP2 Retrofitter™** até ouvir um "clique" 3 vezes, mantendo a amostra entre as paredes do Retrofitter e o tubo.

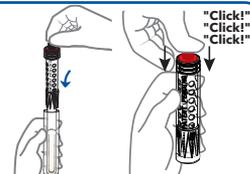

- 4** Para retirar o aplicador, puxa-o suavemente para fora, tendo o cuidado de não puxar o véu. Deita fora o aplicador juntamente com o lixo doméstico normal.

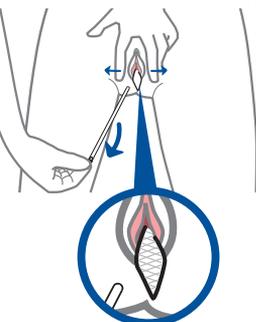

ATENÇÃO! Dependendo do tamanho da tua vagina e da forma como inseriste o véu intravaginal, é obrigatório que a extremidade em forma de V fique visível para que possa ser removida após a utilização.

- 5** Espera 2 minutos com o véu inserido na cavidade vaginal.



- 10** Guarde o recipiente com a amostra recolhida num local limpo e seco, protegido da luz solar. Siga os passos recomendados pelo seu médico, farmacêutico ou profissional que lhe recomendou a auto-coleta de amostras.

