


V-Veil UP2™ KIT 1.3

V-Veil UP2™ ir UP2 Retrofitter™
mėgintuvėlis

Perskaitykite ir saugokite šį lapelį

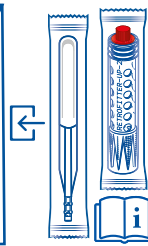

Žiūrėkite vaizdo įrašą anglų kalba apie tai, kaip naudoti rinkinyje esantį įrenginį

KAS YRA V-Veil UP2™ RINKINYS IR KADA JI GALIMA NAUDOTI?

V-Veil UP2™ KIT 1.3 – tai savarankiškos mėginio ėmimo procedūros paketas, naudojamas makšties ertmėje ir gimdos kaklelyje esančioms išskyroms, įvairiems skysčiams ir medžiagoms surinkti, siekiant diagnozuoti, atliekant laboratorinius tyrimus.

DĖMESIO! Rinkinį galima naudoti kraujavimo, nėštumo metu arba po toksinio šoko sindromo tik gydytoji rekomendavus.

PAKUOTĖJE YRA:

- 1 **V-Veil UP2™** makšties išskyrų kolektoriaus uždanga, kuri yra UVC šviesa dezinfekuota, nesterili I klasės medicinos priemonė;
 - 1 naudojimo instrukcija;
 - 1 UP2 Retrofitter mėgintuvėlis
- Reikalingas chronometras, kuris į rinkinį neįtrauktas.

REKOMENDACIJOS IR PATARIMAI

- Prieš naudodama šį RINKINĮ nusiplaukite rankas.
- Nenaudokite, jei per pastarąsias 2 dienas turėjote lytinių santykių.
- Nenaudokite, jei visai neseniai, t. y. mažiau nei prieš nei 48 val., prausėte makšties ertmę.
- Likus 48 valandoms iki savarankiško ėminio paėmimo reikia vengti kitų intravaginalinių gydymo priemonių (ovulijų, gelių, kremų, kontraceptinių priemonių, intymios higienos priemonių, lubrikantų) ar kitų intravaginalinių procedūrų (tepinėlių tamponėlių ėmimo, intymios higienos tamponų, intymios higienos servetėlių, makšties apžiūros).
- Jei esate nėščia arba makšties ertmėje yra kraujo, šią medicinos priemonę naudokite tik gydytoji patarus.
- Uždangalas neturi likti makštyje ilgiau kaip 30 minučių, tačiau jei pamiršote jį ištraukti, ištraukite, kai prisiminsite.
- Vienu metu naudokite tik vieną uždangalą.
- Uždangalas neturėtų būti naudojamas pakartotinai, net jei nėra impregnuotas.
- Dėl išsamesnių rekomendacijų pasitarkite su gydytoju, ginekologu arba vaistininku.

KAM DRAUDŽIAMA NAUDOTI ŠĮ GAMINĮ?

Moterys, kurios:

- karščiuoja arba turi į gripą panašius simptomus, net ir lengvų;
- patyrė toksinio šoko sindromą ir neturi gydytojo specialisto rekomendacijos atlikti tyrimą;
- yra alergiškos plastikams ir jų dariniams;
- yra jaunesnės nei 18 metų ir neturi tėvų ir (arba) gydytojo sutikimo;
- apžināti nelasija instrukcijų lapu;
- kraujuoja ir neturi medicinos specialisto rekomendacijos atlikti tyrimą;
- yra nėščios ir neturi medicinos specialisto rekomendacijos atlikti tyrimą.

SVARBI INFORMACIJA APIE TOKSINIO ŠOKO SINDROMĄ

Toksinio šoko sindromas (TSS) yra reta infekcija, kuria gali susirgti vaikai, vyrai ir moterys (nepriklausomai nuo to, ar joms yra menstruacijos, ar ne). Ji sukelia toksinas, kurį gamina organizme paplitusi bakterija (stafilokokas). Pusė iki šiol užregistruotų TSS atvejų pasireiškė paaugliams ir moterims menstruacijų metu. Sindromas siejamas su tamponų naudojimu, tačiau jis gali pasireikšti ir tada, kai naudojamos kitos apsaugos priemonės (iklotai ir t. t.). TSS yra potencialiai mirtina infekcija ir dėl šios priežasties turi būti nustatyta labai anksti ir nedelsiant gydoma. TSS simptomai gali pasireikšti staiga, menstruacijų metu arba netrukus po jų. Jie gali pasireikšti ne visi ir ne vienu metu: staigus karščiavimas (>39C), vėmimas, viduriavimas, gerklių skausmas, galvos svaigimas, apulys, raumenų skausmas, į nudegimą saulėje panašus bėrimas (po kelių dienų oda gali luptis). Jei pasireiškė šie simptomai, turėtumėte nedelsiant ištraukti uždangalą ir kreiptis į asmeninį arba artimiausią gydytoją. TSS gali pasireikšti naudojant arba nenaudojant **V-Veil UP2™**. Jeigu jums anksčiau jau buvo pasireiškęs TSS, prieš naudodama **V-Veil UP2™** pasitarkite su gydytoju. Tinkamai naudodama **V-Veil UP2™** ir laikydamasi rekomendacijų, sumažinsite toksinio šoko sindromo išsivystymo riziką.

LAIKYMAS

Laikykite švarioje, sausoje vietoje, atokiau nuo šilumos šaltinių.

PRANEŠIMAS APIE INCIDENTUS

DĖMESIO! Teisinę informaciją, indikacijas ir apribojimus galima nurodyti tik naudojimo instrukcijoje. Nenaudokite produkto, jei pakuotė pažeista ir jei pasibaigęs tinkamumo naudoti terminas. Jei, nepaisant priemonių, kurių imamės gamybos procese, manote, kad gavote nekokybišką gaminį, nenaudokite jo ir kreipkitės į gamintoją arba platintoją, aiškiai nurodydami problemą ir ant pakuotės nurodytą partijos numerį. Apie su prietaisu susijusius incidentus galima pranešti gamintojui adresu client@vvup.org ir valstybės narės, kurioje esate, kompetentingai institucijai. **V-Veil UP2™** RINKINYS yra pagamintas pagal galiojančias Europos Sąjungos nuostatas ir reikalavimus.

	Medicinos priemonė
	Europos atitiktis
	Nesterili
	Nenaudoti, jei pakuotė pažeista
	Laikyti sausi
	Laikyti atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių
	Nenaudoti pakartotinai
	Dėmesio
	Perskaityti pranešimą
	In vitro diagnostika
	Išmesti į šiukšlių dėžę
	Nemesti į klozetą



Įgaliotasis platintojas: žr. informaciją ant pakuotės.

Laukiama patentų – makšties išskyrų kolektoriaus **V-Veil UP2™**


V-VEIL-UP PRODUCTION SRL

Clocanesti 280B Calinesti
117197 Arges ROMANIA
client@vvup.org
TEL : 0040 348 420 620


RINKINIO NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

1

- 1** Nusiplaukite rankas ir nušluostykite jas švari rankšluosčiu.

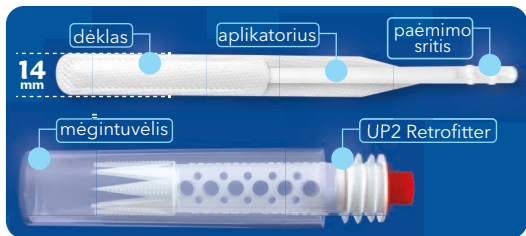

- 2** Atidarykite dėžutę ir išimkite **V-Veil UP2™** iš pakuotės, atidarydama tam skirtoje pusėje. Dėžutę pasilikite, o atidarytą pakuotę išmeskite kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis.

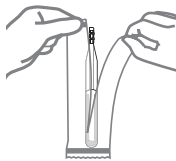


RINKINIO NAUDOJIMO INSTRUKCIJA


2

- 6** Norėdama ištraukti **V-Veil UP2™**, nusiplaukite rankas ir nusišluostykite jas švari rankšluosčiu.


Atidarykite **UP2 Retrofitter™** mėgintuvėlio dangtelį ir laikykite jį rankoje. Padėkite mėgintuvėlį ant lygaus, švaraus paviršiaus.

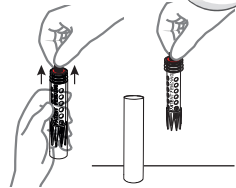


- 3** Pirštais suimkite aplikatorių už galo (rankenos srityje). Atsipalaiduokite ir pasirinkite jums patogiausią padėtį: sėdėdama išskėstomis kojomis, stovėdama viena pakelta koja arba stovėdama šiek tiek sulenkusi kelius. Praskėskite išorines lytines lūpas ir priartinkite viršutinę **V-Veil UP2™** dalį prie makšties. Švelniai įkiškite uždangalą su aplikatoriumi. Atsargiai stumkite uždangalą su aplikatoriumi, kol makšties išorėje liks tik užspaudimo sritis. V formos galas turi laisvai kaboti už makšties ribų.

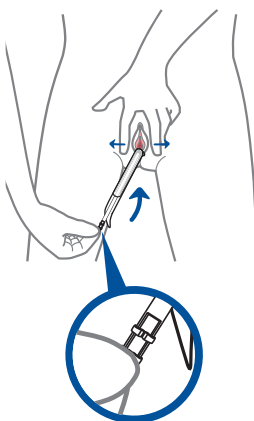


- 7** Atsipalaiduokite ir pasirinkite jums patogiausią padėtį iš pirmiau minėtų. Uždangalą galima lengvai ištraukti, patraukus už V formos galo.

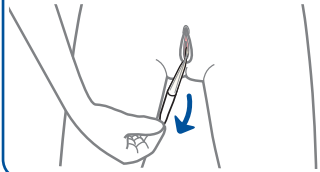

- 8** Įdėkite mėginį į mėgintuvėlį.

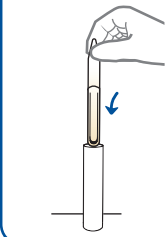


- 9** Kad uždarytumėte **UP2 Retrofitter™** dangtelį, spauskite kol 3 kartus išgirsite „spragtelėjimą“, laikydami mėginį tarp „Retrofitter“ sienelių ir mėgintuvėlio.

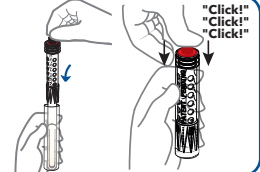

- 10** Talpyklą su paimtu mėginiu laikykite švarioje ir sausoje vietoje, apsaugotoje nuo saulės spindulių. Atlikite gydymo, vaistinio ar specialisto, rekomendavusio jums paimti mėginį, nurodytus veiksmus.



- 4** Norėdama ištraukti aplikatorių, švelniai jį patraukite, stengdamasi neištraukti uždangalo. Išmeskite aplikatorių kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis.

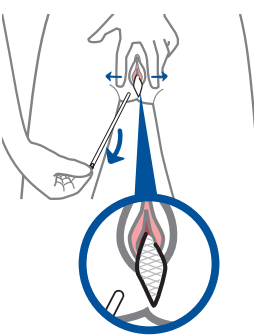

DĖMESIO! Priklausomai nuo makšties dydžio ir nuo to, kaip įdėjote intravaginalinį uždangalą, V formos galas privalo likti matomas, kad jį būtų galima ištraukti po naudojimo.

- 5** Palaukite su j makšties ertmę įkištu uždangalu 2 minutes.

